



ThermaSolutions

the original

Hyperthermic Perfusion Company

**ThermoChem™
HT-2000
&
HT-2500**

*Patients traités
dans le monde
entier depuis notre
autorisation FDA
en 1999*

*Entièrement
focalisée et
dédiée à ce
traitement*

*Simplicité
d'utilisation de
nos équipements
et consommables
usage unique*



*Formation et
Support jouent
un rôle majeur
dans notre
stratégie*

www.thermasolutions.com


La famille d'équipements ThermoChem™ HT est le successeur du premier système entièrement intégré spécifiquement conçu et fabriqué pour le Perfusion Hyperthermique. En exploitant la chaleur et sa puissance, cette technologie médicale avancée offre un nouveau choix dans les traitements chirurgicaux d'appoint. Utilisé en peropératoire, la série ThermoChem™ HT-2000 augmente la température, jusqu'à une cible prédéterminée par le chirurgien, de la cavité péritonéale par le chauffage et la circulation en continu d'une solution stérile.

Le système ThermoChem™ HT est optimisé pour un assemblage facile du consommable usage unique, un chauffage rapide, une utilisation précise et efficace, une gestion des déchets sécurisée.

La série d'équipements ThermoChem™ HT-2000 inclue 2 composants majeurs:

- Les équipements ThermoChem™ HT-2000 et HT-2500
 - Température réglable de 36 à 47°C (incrément de 0.1)
 - Débit réglable de la pompe péristaltique de 0 à 2400 ml/min
 - Aspiration régulière par gravité et/ou vide
 - Ecran tactile interactif pour une lecture précise et réglage des températures solution patient, du débit et du niveau de pression
 - Enregistrement et sauvegarde des données de la procédure patient

- Le kit usage unique de Perfusion Hyperthermique
 - Optimisé pour les procédures ouvertes et fermées
 - Emballé tout inclus, tubing pré connecté avec plusieurs variantes possibles
 - Réservoir de liquide de 4L
 - Echangeur thermique de haute performance
 - Sondes de température patient, capteur de pression
 - Variantes des Aspirations :
 - Tubes d'aspiration individuels ou tube Lasso pour technique fermée ou Lasso laparoscopique pour CHIP sous laparoscopie
 - Injections et aspiration avec drains silicone multi perforés et protecteur d'aspiration
 - Poche déchet intégrée pour une gestion complète en circuit fermé.

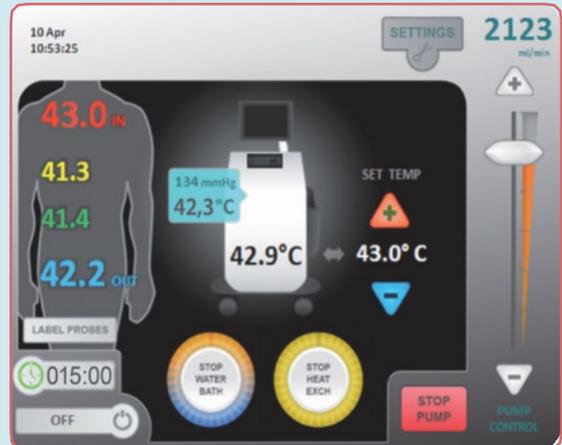

ThermaSolutions LLC

1889 Buerkle Road
 White Bear Lake, MN 55110
 USA
 Tel. : +1 651 209 3900
 Fax : +1 651 209 3903
 E-mail : info@thermasolutions.com

ThermaSolutions Europe B.V.

Takkebijsters 41
 4817 BL Breda
 The Netherlands
 Tel. : +31 76 579 1144
 Fax : +31 76 579 1149
 E-mail : emea@thermasolutions.com

Programme Support : support clinique par nos centres de référence, formation utilisateur/maintenance et support bloc opératoire

** Vérifier disponibilité dans votre pays*

Ref # MK-7515 rev.B (12.20)